


NORIKS kompressziós harisnya cipzárral

Fokozatos kompresszió 15–20 mmHg oldalsó cipzárral.

Kompresszió	15 – 20 mmHg, fokozatos (a bokánál a legerősebb)
Cipzár	Oldalsó cipzár védő belső pánttal
Méretek	S/M, L/XL, 2XL — a vádli körfogata szerint
Viselés	Napközben, legfeljebb 12 órán át
Mosás	Kézzel hideg vízben vagy kímélő programon

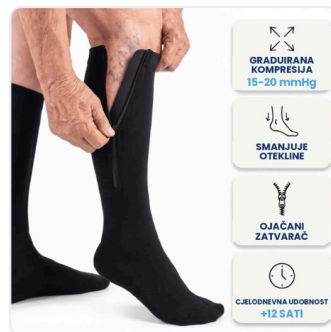

A CSOMAGBAN

- 1 pár kompressziós harisnya (a választott csomag szerint)

GYORS KEZDÉS

- Mérd meg a vádli körfogatát a legszélesebb ponton, és válaszd ki a méretet a táblázatból.
- A harisnyát reggel, ülve vedd fel, mielőtt a láb megduzzadna.
- A cipzárt a bokától felfelé húzd, közben tartsd az anyagot a lábadhoz.

1. Méretválasztás

Méret	Vádli körfogata	Cipőméret
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

A méretet a **vádli körfogata** alapján válaszd, ne cipőméret szerint. Reggel mérd, a vádli legszélesebb pontján, ellazított lábbal. Ha két tartomány határán vagy, a nagyobb méretet válaszd.

2. Felvétel

- Ülj le, és húzd le a cipzárt teljesen.
- Húzd a harisnyát a lábfejre úgy, hogy a sarok a neki kialakított részbe kerüljön.
- Igazítsd a harisnyát a vádlihoz, egyetlen ránc nélkül — a ráncok nyomáspontokat hoznak létre.
- Egyik kezeddal nyomd az anyagot a lábadhoz, hogy a védőpánt a cipzár és a bőr között maradjon, a másikkal lassan húzd fel a cipzárt a bokától felfelé.
- Ellenőrizd, hogy a felső szegély nem sodródik-e fel és nem vág-e a térdbe.

**VIŠE OD 5.200
ZADOVOLJNIH KUPACA**



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

A cipzár húzkodás nélkül könnyíti meg a felvételt.



Fokozatos kompresszió: a bokánál a legerősebb, a térd felé gyengébb.

3. Meddig viseld

- Reggel vedd fel, és viseld napközben — körülbelül 12 óráig.
- Lefekvés előtt vedd le, hacsak az orvos másként nem rendelte.
- Hosszabb állásnál, ülésnél vagy utazásnál a teljes tevékenység alatt viseld.
- Az első napokban a kompresszió szokatlan lehet — kezd napi 2 – 3 órával.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A cipzár magától kinyílik	Az anyag lecsúszott, vagy a körfogat a felső határon van	Zárás előtt húzd a harisnyát feljebb a vádlin; ha ismétlődik, válassz nagyobb méretet
Nem tudom felhúzni a cipzárt	Túl kicsi méret vagy duzzadt láb	Reggel vedd fel; ha akkor sem megy, cseréld nagyobb méretre
Bizsergés, hideg vagy sápadt lábujjak	Túl erős kompresszió vagy szorító ránc	Azonnal vedd le a harisnyát, simítsd ki és vedd fel újra; ha ismétlődik, fordulj orvoshoz
A harisnya lecsúszik	A vádli körfogata a tartomány alsó határán van	Válassz kisebb méretet
Piros nyomok a bőrön	Ránc vagy túl szoros felső szegély	Simítsd ki az anyagot; a kötés enyhe lenyomata normális, a mélyen bevágódó nyom nem

5. Mosás és ápolás

- Mosd kézzel hideg vízben, vagy gépben a finom mosás programján, **felhúzott cipzárral** és hálós zsákban.
- Fehérítő és öblítő nélkül — károsítják a kompressziót adó rugalmas szálakat.
- Levegőn, fektetve szárítsd. Ne szárítógépben, radiátoron vagy napon.
- A cipzárt időnként töröld át nedves ruhával, hogy ne maradjanak benne szálak.

- Napi viselés mellett a párt körülbelül félévente cseréld — a kompresszió idővel gyengül.

Viselés előtt kérj orvosi tanácsot, ha perifériás artériás betegséged, nyílt sebed, akut bőrgyulladásod, cukorbetegséggel összefüggő lábelváltozásod vagy mélyvénás trombózisod van.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.
- A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.
- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

A kompressziós harisnya mindennapi támasz, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát. Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.