

NORIKS Bunion Fix — bűtyökkorrektor

A nagylábujj fokozatos helyreállítása napi 30 perctől 3 óráig.

Méret	Univerzális — minden lábmérethez illik
Oldal	Ugyanaz a korrektor bal és jobb lábra
Bélés	Puha belső bélés, amely védi a bőrt
Beállítás	Rugalmas pántok állítható feszességgel
Ajánlott	Napi 30 perctől 3 óráig



A CSOMAGBAN

- 1 bűtyökkorrektor
- Rugalmas pántok a beállításhoz


GYORS KEZDÉS

1. Helyezd fel a korrektort úgy, hogy a párna a kiálló csonthoz feküdjön, a hurok pedig körülfogja a nagylábujjat.
2. A pántot csak annyira húzd meg, hogy enyhe nyújtást érezz — soha ne fájdalomig.
3. Az első héten napi 30 percig viseld, azután fokozatosan növel.

1. Felhelyezés

1. Ülj le, és támaszd meg a lábfejed úgy, hogy az ujjak ellazuljanak.
2. Fűzd át a nagylábujjat a hurkon, amíg a párna rá nem fekszik a lábfej oldalán kiálló csontra.
3. Vezesd a pántot a lábfej közepe köré, és csak annyira húzd meg, hogy enyhe nyújtást érezz.
4. Ellenőrizd, hogy a párna simán, ráncmentesen fekszik-e, és a pánt nem szorítja-e a lábfej tetejét.
5. A nagylábujjat kifelé kell húzni, de fájdalmat okozó feszülés nélkül.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

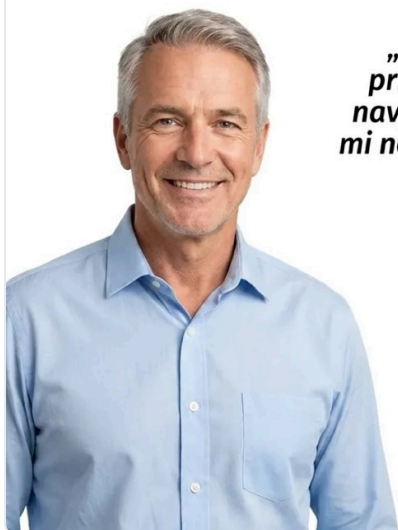

„Mekan je i lako se
prilagodi. Stavim ga
navečer uz TV i uopće
mi ne smeta — zato ga
nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



A korrektor körülfogja a nagylábujjat és tehermentesíti a kiálló
csontot.

Zašto je Noriks drugačiji:



A cél a nagylábujj fokozatos visszaterelése helyesebb állásba.

2. Viselési terv

Időszak	Naponta	Mikor
1. hét	30 perc	Este, ülve
2. hét	45 – 60 perc	Este vagy pihenés közben
3. hét	1 – 2 óra	Két részre osztva
A 4. héttől	2 – 3 óra	Egy vagy két részletben, kényelem szerint

A rendszeresség fontosabb a hosszúnál. A napi harminc perc jobb eredményt hoz, mint heti egyszer három óra.

3. Mire számíthatsz

- Első napok: nyújtás és tehermentesülés érzése a korrektor levétele után.
- Körülbelül két hét következetes használat után: kisebb kellemetlenség járás és állás közben.
- Körülbelül egy hónap után: szemmel láthatóbb változás a nagylábujj állásában.
- A korrektor viselés közben és rendszeres használat mellett hat — nem egyszeri megoldás.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
Fájdalom viselés közben	A pánt túl szorosan van húzva	Lazíts a pánton; az érzés nyújtás legyen, soha ne fájdalom
A korrektor lecsúszik a lábujjról	A pánt túl laza vagy nedves a bőr	Száradtsd meg a lábfejet, és húzd meg a pántot egy fokozattal
Bőrpír	Ránc a béléseken vagy kezdetben túl hosszú viselés	Simítsd ki a bélést, és rövidítsd a viselést 30 percre

5. Tisztítás

- Töröld át nedves ruhával és enyhe szappannal, öblítsd le és szárítsd levegőn.
- Ne mosd mosógépben és ne szárítsd radiátoron — a gumi elveszíti a feszségét.

Ne viseld a korrektort nyílt seben vagy gyulladt bőrön. Cukorbetegség, csökkent lábérzékelés vagy erős, tartós fájdalom esetén előbb kérj orvosi tanácsot.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.
- A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.
- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

A Bunion Fix mindennapi támasz, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát. Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.