

NORIKS ErgoSit — ortopéd ülőpárna

Farokcsont-kivágás és nagy sűrűségű memóriahab a hosszú üléshez.

Hab	Nagy sűrűségű OrthoFlex memóriahab
Tanúsítvány	OEKO-TEX®, nem mérgező
Forma	Farokcsont-kivágás, formára szabott megtámasztás a csípőnek és a gerincnek
Huzat	Levehető, gépben mosható
Használat	Irodai szék, autó, utazás



A CSOMAGBAN

- 1 ErgoSit párna
- Levehető, mosható huzat

GYORS KEZDÉS

1. Vegye ki a párnát a csomagolásból, és hagyja 24 órán át, hogy a hab visszanyerje a teljes formáját.
2. Tedd a székre úgy, hogy a kivágás hátul, a farokcsont alatt legyen.
3. Üljen be teljesen hátra, a talpát legyen a padlón.

1. Az első használat előtt

- A párna szállításhoz össze van nyomva — kicsomagolás után hagyja 24 órán át szobahőmérsékleten. Ez idő alatt többször gyúrja át kézzel és rázza meg, hogy a hab eloszoljon.
- Az új hab szaga néhány óra szellőztetés után elmúlik.


2. Helyes elhelyezés

1. Tedd a párnát az ülőlapra úgy, hogy a **kivágás hátul** legyen — a farokcsont alatt, ne elöl.
2. A párna lapos részének teljesen az ülőlapon kell feküdnie, a szélén túllógás nélkül.
3. Üljen be teljesen hátra, hogy a hátad érintse a támlát.
4. Állítsd be a szék magasságát úgy, hogy a térded a csípő magasságában vagy kissé alatta legyen, a talpát pedig a padlón.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

A kivágás megszünteti a közvetlen nyomást a farokcsonton.

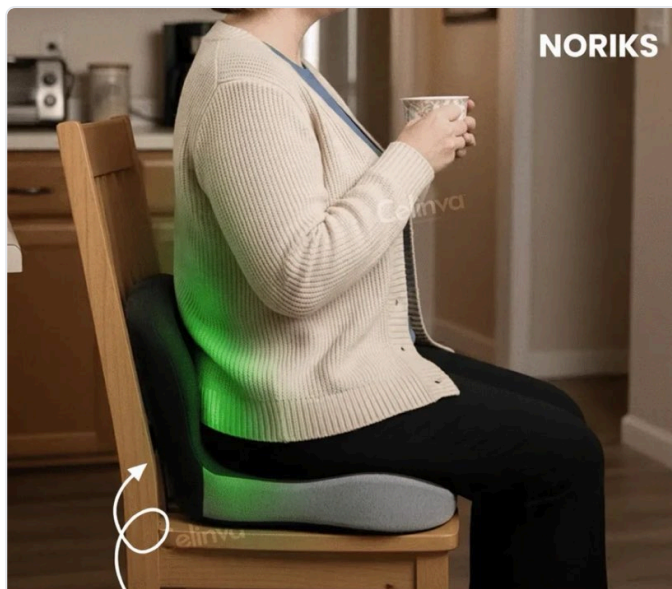

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

A formára szabott felület egyenletesen osztja el a testsúlyt a csípőn.

3. Mindennapi használat

- A párna mindennapi üléshez készült — irodában, autóban és utazáson.
- Párnával is állj fel óránként, és sétálj néhány percet.
- Ne használd nagyon puha vagy egyenetlen felületen — elvesz a megtámasztás.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A párna csúszik a széken	Sima ülőlap-kárpit	Fordítsd a huzatot csúszásgátló oldalával lefelé; bőrszékre tegyél alá vékony alátétet
A farokcsontra nehezedő nyomás megmaradt	A kivágás előre néz	Fordítsd meg a párnát — a kivágás hátra való
A hab keménynek tűnik	Hideg helyiség	A memóriahab testhőmérsékleten néhány perc alatt megpuhul
A párna túl magas az asztalhoz	Beállítatlan székmagasság	Engedd le a széket a párna magasságával

5. Mosás és ápolás

- Vedd le a huzatot, és mosd gépben 30 °C-on, kímélő programon.
- **A habot soha ne mosd gépben és ne merítsd vízbe.** A foltokat töröld le nedves ruhával, és hagyd levegőn megszáradni.
- A habot ne szárítsd radiátoron vagy közvetlen napon.
- Ne tárold a párnát teher alatt összenyomva — a hab csak tehermentesen tartja meg a formáját.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.

- A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.
- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

Az ErgoSit üléshez való mindennapi támaszt adó párna, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát. Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.