

NORIKS FisioRest — nyakkészülék

Nyújtás, meleg és vibrációs masszázs 15–30 perces kezelésben.

Akkumulátor	2500 mAh — akár 2 óra üzemidő, körülbelül 4 darab 30 perces kezelés
Töltés	USB-C, 4 – 6 óra a teljes feltöltésig
Melegítés	Legfeljebb 50 °C, ThermoTrac technológia
Biztonság	Automatikus kikapcsolás 30 perc után
Kezelés	Kezdetben 15 perc, később akár 30 perc

CERVIKALNA TRAKCIJA VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



A CSOMAGBAN

- 1 FisioRest készülék
- USB-C töltőkábel
- Útmutató

GYORS KEZDÉS

1. Az első használat előtt töltsd a készüléket 4 – 6 órán át.
2. Feküdj a hátadra, és fektesd a nyakadat a vájatba úgy, hogy a fejed szabadon hátrahajoljon.
3. Tartsd nyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény ki nem gyullad; kezd 15 perccel.

1. Az első használat előtt


- 1 Csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt, és töltsd a készüléket 4 – 6 órán át.
- 2 Tedd a készüléket sík, kemény felületre — az ágy túl puha a megfelelő nyújtáshoz.
- 3 Vedd le a nyakláncot, a fülbevalót és a szemüveget.
- 4 Feküdj a hátadra, és fektesd a nyakadat a memóriahabos vájatba.

2. Kezelőszervek

- **Bekapcsolás:** tartsd nyomva a masszázs vagy a meleg gombját 5 másodpercig, amíg a jelzőfény ki nem gyullad.
- **Fokozatváltás:** ugyanannak a gombnak a rövid megnyomásával változtathatod az erősséget.
- **Kikapcsolás:** tartsd újra nyomva a gombot 5 másodpercig, vagy várd meg a 30 perc utáni automatikus kikapcsolást.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIĆE

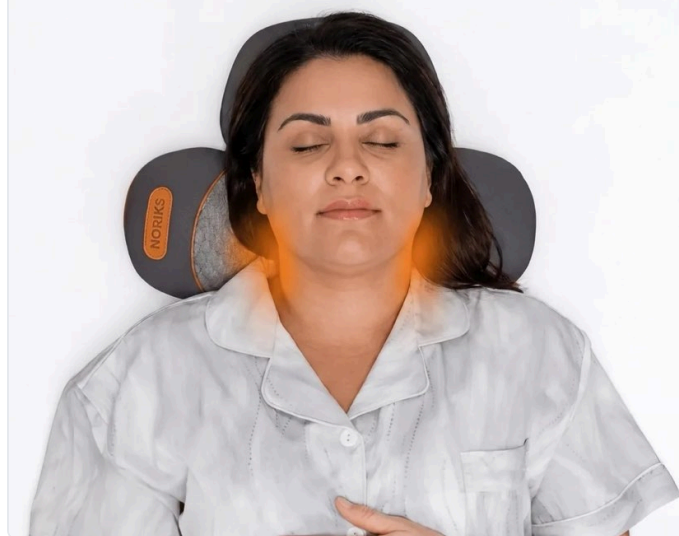

A nyak a vájatban fekszik, a fej szabadon hátrahajlik.



KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

A meleg, a masszázs és a nyújtás egyszerre hat.

3. Kezelés

Időszak	A kezelés hossza	Gyakoriság
Első hét	15 perc	napi 1×
Második hét	20 perc	napi 1×
A harmadik héttől	30 perc (teljes ciklus)	napi 1 – 2×

A finom meleg, a masszázs és a nyújtás teljes ciklusa 30 percig tart. Az elején rövidítsd le a kezelést, hogy a nyak hozzászokjon a nyújtáshoz.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

A kezelés után lassan kelj fel, előbb fordulj az oldaladra.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor vagy túl rövid gombnyomás	Töltsd 30 percre, és tartsd a gombot teljes 5 másodpercig nyomva
Nem érezhető a nyújtás	A készülék túl puha felületen van, vagy a nyak túl magasan	Váltás kemény felületre, és engedd le a vállaidat a padlóig
A meleg gyengén érezhető	A készülék még melegszik	A felmelegedés néhány percre tart; ne takard le a készüléket
Szédülés a kezelés után	Túl gyors felkelés	Maradj fekvő 1 – 2 percre, fordulj az oldaladra, és csak azután kelj fel

Mi történik	Ok	Megoldás
Az akkumulátor gyorsan lemerül	A legmagasabb melegítési fokozat folyamatos használata	A melegítés fogyaszt a legtöbbet; használd a középső fokozatot

5. Tisztítás és tárolás

- Töröld át nedves ruhával; a készüléket soha ne merítsd vízbe és ne mosd folyó víz alatt.
- A huzatot, ha levehető, mosd kézzel hideg vízben.
- Száraz helyen tárold, közvetlen napfénytől védve. Az akkumulátor akkor tart legtovább, ha a készüléket nem hagyod hónapokig lemerülve.

Ne használd a készüléket, ha szívritmus-szabályozód van, nyaki gerincműtét után, csonttritkulás esetén, erős vagy a karba sugárzó fájdalomnál, kezeletlen magas vérnyomás esetén és terhesség alatt — előbb kérj orvosi tanácsot. Szakítsd meg a kezelést, ha fájdalmat, bizsergést vagy rosszullétet érzel.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.
- A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.
- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

A FisioRest lazítást és mindennapi támaszt adó készülék, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát. Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.